

1 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ..



УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЙКИ



ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШ ТЕКУЩИЙ ТОН ЗУБОВ СОГЛАСНО ШКАЛЕ




ПОЧИСТИТЕ ЗУБЫ ЩЕТКОЙ И НИТЬЮ



СДЕЛАЙТЕ ФОТО ДО ОТБЕЛИВАНИЯ

2 ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРЫ

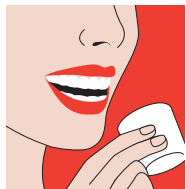

ШАГ 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЗУБОВ С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ ACCELERINSE:

Налейте ополаскиватель до отметки в 10мл, указанной на крышке флакона ополаскивателя. Энергично прополощите зубы в течение 10 секунд. Не глотать.



ШАГ 2 ОТБЕЛИТЕ КАЖДЫЙ ЗУБ СЫВОРОТКОЙ STAIN LIFTING SERUM:

Взболтайте в течение 3-5 секунд флакон с сывороткой. Затем нанесите сыворотку на поверхность каждого зуба, который Вы хотите отбелить, избегая попадания на дёсны. При необходимости смачивайте кисть в сыворотке. В течение 20 секунд, пока сыворотка не высохнет, избегайте контакта языка и губ с обработанными зубами.



ШАГ 3 АКТИВИРУЙТЕ СЫВОРОТКУ ПРИ ПОМОЩИ ОТБЕЛИВАЮЩЕГО СВЕТОВОГО УСТРОЙСТВА WHITENING LIGHT:

Разместите устройство Whitening Light на расстоянии примерно 2.5 см напротив зубов. Если Вы хотите расположить губы на резиновой части устройства Whitening Light, намажьте их предварительно тонким слоем вазелина, чтобы избежать раздражения. Для предотвращения слюноотделения, положите ватный тампон или мелкие салфетки за нижней губой и/или под язык. Нажмите на кнопку, чтобы включить устройство - он просигналит дважды. Держите его неподвижно в течение 2-х минут. По истечении времени устройство издаст сигнал снова и автоматически отключится.

Повторите шаги 1-3 до 20 раз в зависимости от Вашего индивидуального графика отбеливания. Нет необходимости ополаскивать зубы водой между процедурами.

3 ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОТБЕЛИВАНИЯ

Сроки отбеливания	Кол-во процедур	Режим
Никогда не отбеливали? Полный курс:	10-20	30-60 мин., за 1 раз или в течение 7дней
Прошло менее 6 месяцев? Обновление:	10	30 мин., за 1 раз или в течение 3 дней
Есть планы? Быстрый эффект:	5	10 мин., за 1 раз, одну за другой

4 ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШЕЙ ИСТОРИЕЙ...



Отмечайте свой прогресс в отбеливании на обратной стороне шкалы оттенков. Когда Вы закончите с желаемым количеством процедур, не забудьте сделать фото «после» и поделитесь своей историей отбеливания с нами! info@lusterpremiumwhite.com, @lusterpremiumwhite.com

5 ПРИГОТОВЬТЕСЬ К КОМПЛИМЕНТАМ

Производитель: Dentovations Inc., Boston, French Transit, Ltd., 398 Beach Road, Burlingame CA 94010. Сделано в США. Поставщик: ООО «Мирт Групп», Украина, 01042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, 4/6А, а/я № 11 (2), www.stop-pot.in.ua, тел. +38 (044) 200-01-91, моб. +38 (067) 243-37-18, order@stop-pot.in.ua

РЕКОМЕНДАЦИИ:

После процедур воздержитесь от еды и питья в течение 30 минут. Для наилучших результатов используйте в комплексе с ежедневными отбеливающими зубными пастами Luster (мы рекомендуем Luster Power White). Зубные пасты Luster содержат фторид и заботятся о здоровье Ваших зубов каждый день!

Подробнее на сайте www.stop-pot.in.ua.

Обязательный полный курс составляет 10-20 процедур 2 раза в год.

Рекомендуется проводить 5 процедур каждые 2-3 месяца для поддержания эффекта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не следует использовать детям в возрасте до 12-ти лет.

Не используйте этот продукт, если у Вас аллергия на какие-либо ингредиенты, входящие в состав.

При беременности перед использованием продукта необходима консультация врача.

Пятновыводящая сыворотка Stain Lifting Serum содержит пероксид, поэтому избегайте её попадания на дёсны, чтобы не вызвать раздражения.

Если возникло раздражение, прекратите использование продукта, прополощите рот водой. Раздражение должно пройти за 3-7 дней.

Избегайте попадания продукта в глаза, слизистую, на ткань. Не глотать.

Не смотрите на свет, излучаемый во время работы светового устройства.

Хранить ополаскиватель и сыворотку при температуре от 10 до 27 градусов C, в недоступном для детей месте.



LUSTER
PRO LIGHT
КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ
РУКОВОДСТВО